

i Neck

air 2

breo



breo

INHALT

Vorsichtsmaßnahmen	03
Konfiguration des Produkts	08
Produktmerkmale	09
Produktfunktionen	10
Entfernen des Akkus	19
Fehlersuche	20
Schutz	21
Garantie/Gewährleistung	23
Informationen zum Produkt	25

Vorsichtsmaßnahmen

Um eine sichere und korrekte Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung gründlich durch. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Folgen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts oder durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen.

	Verwenden Sie das Produkt nicht während Sie fahren.
	Bitte entfernen Sie vor der Benutzung jeglichen Schmuck oder Objekte vom zu massierenden Bereich, die die Massage behindern könnten.
	Verwenden Sie das Produkt nicht in Badezimmern oder anderen feuchten Umgebungen.
	Halten Sie das Produkt von Wasser- und Feuerquellen sowie korrosiven Umgebungen fern.
	Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften, wenn Sie das Produkt in bestimmten Umgebungen verwenden Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Massagebereich operiert wurde.

	Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der zu massierende Bereich Hautverletzungen, Rötungen, Entzündungen, Irritationen oder andere Probleme aufweist.
	Personen, die an einer Herzerkrankung leiden oder gelitten haben, und Personen mit akuten Erkrankungen, Hautkrankheiten, bösartigen Tumoren oder körperlichen Abnormalitäten sollten das Produkt nicht verwenden. Personen mit Blutungsneigung oder anderen Blutkrankheiten sowie Personen mit Osteoporose, Gewebeerkrankungen oder Apoplexie sollten das Produkt nicht verwenden. Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Personen, die an psychosomatischen Störungen oder geistigen Beeinträchtigungen leiden, sollten das Produkt nicht verwenden. Wenn eine Person aus diesem Kreis das Produkt verwenden möchte, vorher den Arzt konsultieren. Benutzen Sie das Produkt nicht länger, wenn während der Anwendung Beschwerden auftreten.
	Frauen, die schwanger sind oder ihre Menstruation haben, sollten das Massagegerät nicht benutzen.

	<p>Kindern unter sechs Jahren ist die Verwendung des Produkts untersagt. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren dürfen das Produkt nur unter Anleitung und Aufsicht ihrer Eltern oder einer anderen zur Beaufsichtigung befugten Person verwenden.</p>
	<p>Verwenden Sie in Alkohol getunkte Watte, um die äußeren Bereiche zu reinigen. Vermeiden Sie die Verwendung von Wasser zur Reinigung.</p>
	<p>Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, die das Produkt zerkratzen oder penetrieren könnten.</p>
	<p>Bei dem Produkt handelt es sich um ein elektronisches Wellness-Produkt für den Heimgebrauch und nicht um ein medizinisches Gerät. Das Produkt ist nicht für Diagnose und Therapie oder kommerzielle Zwecke bestimmt.</p> <p>Das Gerät darf nur mit geringer Spannung (siehe Kennzeichnung) versorgt werden! Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.</p> <p>Schalten Sie die Stromzufuhr sofort ab, wenn es während des Gebrauchs zu Auffälligkeiten kommt. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder zu reparieren.</p> <p>Modelle mit Moxibustionsfunktion besitzen eine beheizte Oberfläche. Personen, die unempfindlich gegenüber Hitze sind, müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.</p>

Wichtige Informationen

※Häufigkeit der Nutzung

Je nach Bedarf jeweils 10-30 Minuten verwenden. Bis zur erneuten Nutzung sollte ein angemessener Zeitraum verstreichen.

Eine übermäßige Nutzung kann zu körperlichen Beschwerden, Nacken- oder Hautverletzungen führen. Bei der Erstanwendung des Produkts sind daher die körperliche Verfassung des Benutzers sowie eventuelle auffällige Auswirkungen auf Nacken, Schulter und Haut zu berücksichtigen und die Anwendungsdauer entsprechend zu reduzieren

※Größe

Das Produkt ist für einen Halsumfang von 30-40 cm geeignet.

※Anwendung

Wenn Sie das Produkt verwenden, schließen Sie bitte Ihre Augen, lehnen Sie sich im Sessel zurück und entspannen Sie Ihren Körper vollständig. Bitte legen Sie Halsketten und anderen Schmuck ab, ebenso wie Kopfhörer oder Namensschilder, die um den Hals getragen werden.


Wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden im Nacken oder in den Schultern verspüren, sollten Sie das Produkt nicht weiter verwenden und sofort einen Arzt aufsuchen.


※Nach Gebrauch


Hals und angrenzende Bereiche können kurzzeitig eine Rötung aufweisen, die aber schnell wieder zurückgeht.

※Sonstiges

Während des Gebrauchs ist ein summendes und wummerndes Geräusch zu hören. Dieses Geräusch entsteht durch die Rotation des Massagekopfes und die Regulierung des Luftstroms. Es handelt sich dabei um keine Fehlfunktion des Geräts.

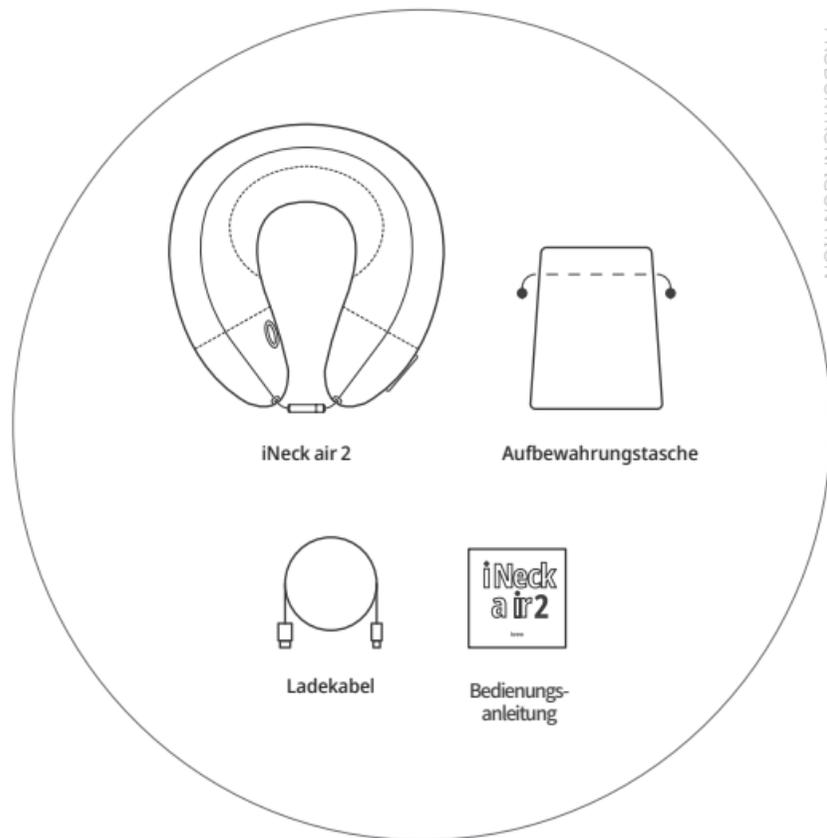

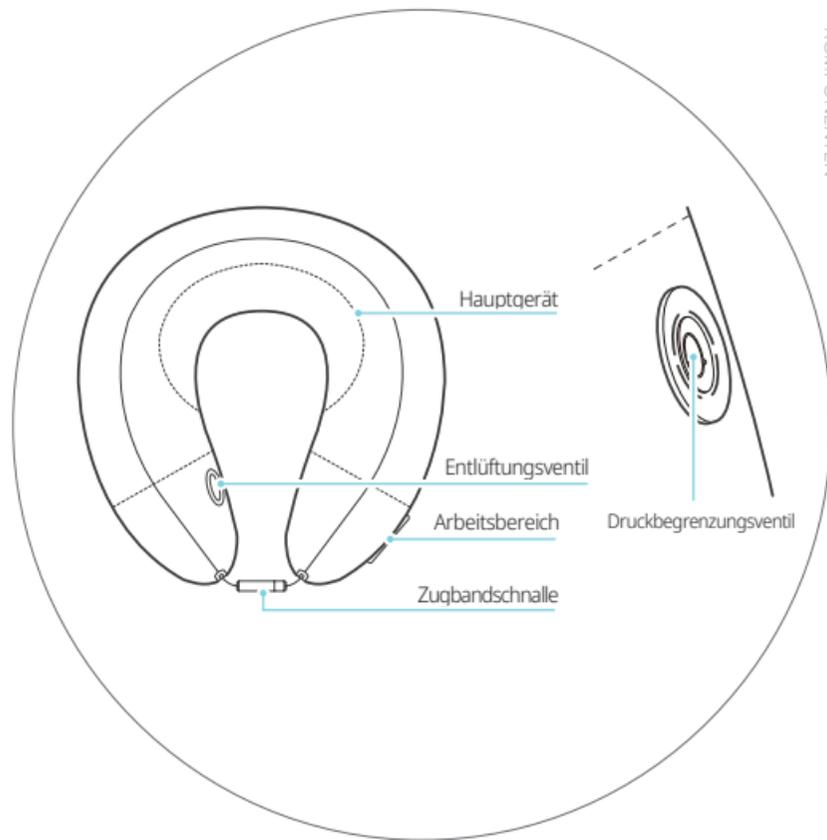

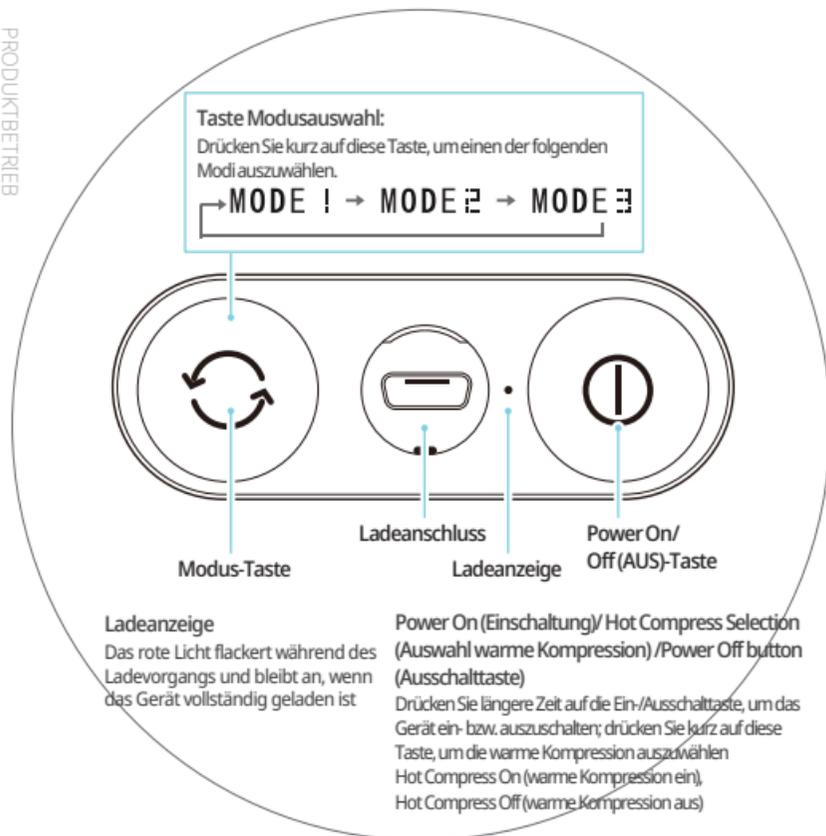

DE

Aufladen

- 1 Öffnen Sie die äußere Silikonkappe am Anschluss.
- 2 Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Anschlusskabels in die Micro-USB-Anschlussbuchse am Hauptgerät.
- 3 Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

Das Hauptgerät lässt einen "Piepton" ertönen. Die Ladeanzeige auf dem Bedienfeld flackert dann auf.

Nach dem Aufladen leuchtet die Ladeanzeige weiter.

※Während des Ladevorgangs ist es normal, dass sich das Hauptgerät und der Netzadapter leicht erwärmen.

Aufladezeit

- 1 Es dauert etwa 3,5 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.
- 2 Nach dem vollständigen Aufladen kann das Produkt 10 Mal verwendet werden, wenn es jeweils 10 Minuten (MODUS 1, MODUS 2) oder 30 Minuten (MODUS 3) lang benutzt wird


(Aufgrund unterschiedlicher Umgebungstemperaturen kann es zu leichten Abweichungen kommen)

- 3 Bitte laden Sie den Akku sofort auf, wenn das Licht der Ladeanzeige zu flackern beginnt.

Nach dem Laden

1 Ziehen Sie den Netzadapter ab und trennen Sie den Micro-USB-Anschluss vom Hauptgerät.

2 Setzen Sie die äußere Silikonkappe wieder auf die Öffnung.

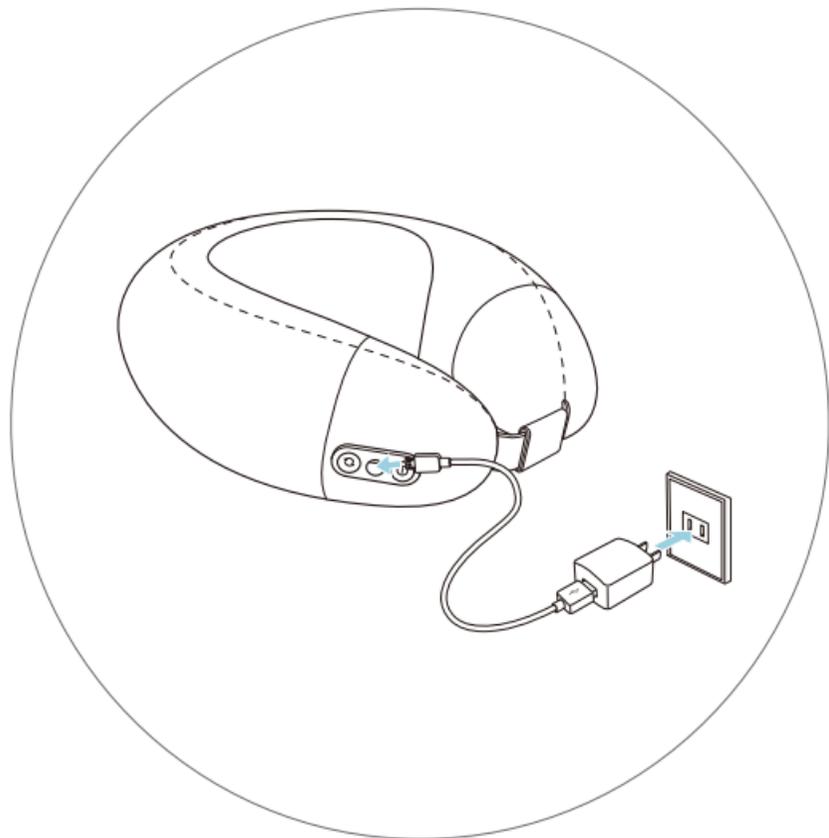

Anlegen des Geräts

1 Drücken Sie den Knopf in der Mitte der Zugbandschnallen, um die Schnallen zu trennen

Das Produkt ist für einen Halsumfang von bis zu 40 cm geeignet.


※ Drücken Sie bitte nicht mit Kraft auf den mittleren Knopf, wenn die Schnalle nicht geschlossen ist. Dies könnte zu Schäden führen.

2 Halten Sie die beiden Enden des Hauptgeräts mit beiden Händen fest. Halten Sie das Gerät hinter Ihren Kopf und führen es von oben nach unten, um es um Ihren Hals zu legen.

Nach der Positionierung des Massagegeräts kann sich das Bedienfeld auf der linken oder rechten Seite befinden.

Sie können die unterschiedlichen Tasten und Tastenpositionen durch Berühren unterscheiden.

Die Einschalttaste und die Modustaste sind beide konkav. Ein Nippel befindet sich neben der Einschalttaste.

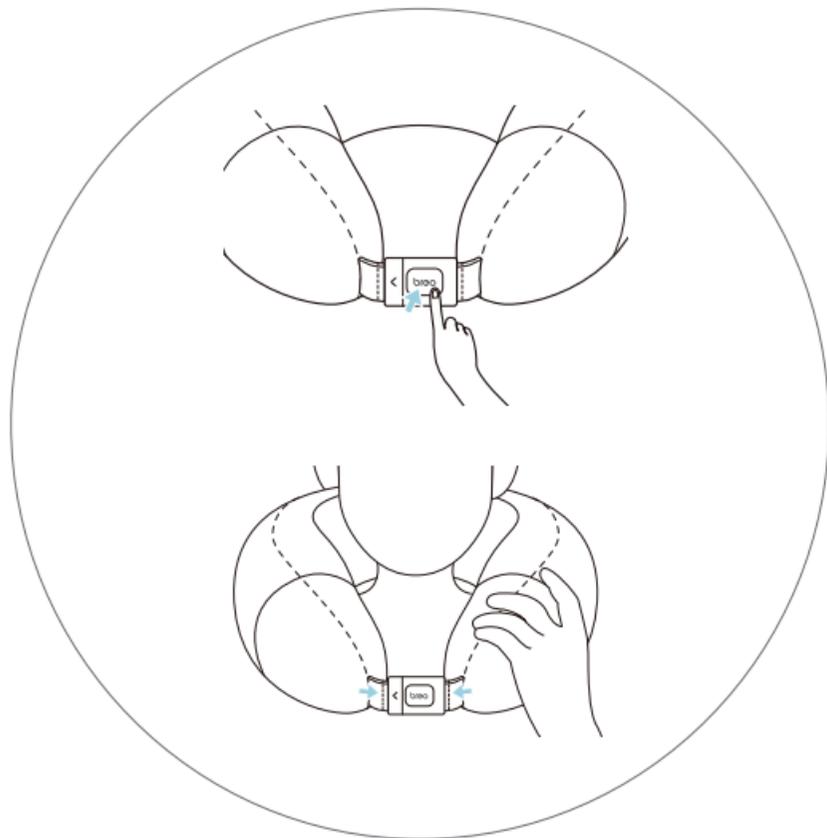

Richtige Verwendung

Das Produkt darf während des Ladevorgangs nicht benutzt werden. Ziehen Sie nach dem Aufladen den Netzadapter ab, bevor Sie das Produkt verwenden.

1 Drücken Sie längere Zeit auf die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät einzuschalten.

Das Hauptgerät gibt einen Piepton von sich. Die Leuchtanzeige auf dem Bedienfeld leuchtet dann auf. Standardmäßig ist MODUS 1 eingeschaltet, und die Hot Compress-Funktion ist aktiviert.

2 Für Ihre Lieblingsmassage müssen Sie die gewünschte Einstellung auswählen, indem Sie die Tasten Power On/Off (Ein-/Ausschalttaste) und Mode drücken.

Drücken Sie beim Einschalten kurz die Ein-/Ausschalttaste, um die Hot Compress-Funktion separat zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Drücken Sie beim Einschalten kurz die Modustaste, um einen der folgenden drei Modi auszuwählen:

MODUS1 Die Gesamtzeit beträgt 10 Minuten
die Massage wird aktiviert; die Massagedrehrichtung wird zu einer festgelegten Zeit geändert;

MODUS2 Die Gesamtzeit beträgt 10 Minuten
die Massage wird aktiviert; der Massagekopf wird zu einem festgelegten Zeitpunkt eingefahren und nach einer kurzen Zeitspanne zur Massage wieder ausgefahren;

Die Gesamtdauer beträgt 30 Minuten

die Massage wird deaktiviert; der Massagekopf wird eingefahren.

3 Legen Sie das Produkt um Ihren Hals. Wenn Sie das Produkt benutzen, entspannen Sie bitte Ihren Nacken und Ihre Schultern, lehnen Sie sich im Sessel zurück und entspannen Sie Ihren Körper vollständig. Ziehen Sie die Schnallen des Zugbandes herunter, um den Druck des Massagekopfes auf den Nacken zu regulieren.

4 Nach 15 oder 30 Minuten Betrieb ertönt ein langer Piepton. Die Leuchtanzeige auf dem Bedienfeld erlischt, und die Stromversorgung wird automatisch unterbrochen.

5 Manuelles Trennen der Stromzufuhr

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste länger als 2 Sekunden. Wenn ein langer Piepton ertönt, wird die Stromzufuhr automatisch unterbrochen.

6 Nach Gebrauch

Drücken Sie den Knopf in der Mitte der Zugbandschnallen, um die Schnallen zu trennen. Halten Sie die beiden Enden des Hauptgeräts mit beiden Händen fest, um dieses abzunehmen.

※2. Bitte beobachten Sie die Auswirkungen auf Hals und Haut, wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, oder wenn Sie eine empfindliche Haut besitzen.

DE Entfernen des Akkus

- 1 Trennen Sie die externe Stromversorgung, und entfernen Sie das Gehäuse des Produkts;
- 2 Trennen Sie die Stromzufuhr zum Akku;
- 3 Entfernen Sie den Akku;
- 4 Entsorgen Sie den alten Akku in einer ausgewiesenen Recycling-Station;
- 5 Bitte beachten Sie die örtlichen Umweltschutzgesetze und Abfallentsorgungsrichtlinien und schützen Sie die Umwelt.

Anmerkungen:

- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, bevor Sie das Gerät verschrotten;
- Vor dem Entfernen des Akkus muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden;
- Der Akku sollte sicher entsorgt werden.



Nur geschultes Fachpersonal darf den Akku entfernen!

DE Fehlersuche

Bitte führen Sie die folgenden Überprüfungen durch, wenn während des Betriebs eine Störung auftritt. Wenn die Störung nicht behoben werden kann oder das Gerät immer noch nicht einwandfrei funktioniert, trennen Sie die Stromversorgung und bitten Sie eine professionelle Fachkraft um eine Reparatur. Versuchen Sie niemals, das Produkt zu zerlegen.

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Fehler beim Einschalten	Prüfen Sie, ob der Akkustand zu niedrig ist	Wenn das der Fall ist, laden Sie den Akku bitte auf
Geringe Massageintensität	Prüfen Sie, ob der Akkustand zu niedrig ist	Wenn das der Fall ist, laden Sie den Akku bitte auf

Wenn das Problem auch nach diesen Fehlerbehebungsversuchen nicht gelöst werden kann, rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter 400-830-9700 an.

Aufbewahrung

Wenn das Produkt länger als 3 Monate gelagert wurde, überprüfen Sie es vor der Verwendung und laden Sie es gegebenenfalls auf. Bewahren Sie das Produkt nicht dicht an Böden, Wänden oder Decken auf, sodass es gequetscht wird. Der Aufbewahrungsort sollte gut belüftet sein. Von starkem Sonnenlicht und korrosiven Gasen fernhalten.

Transport

Die Produktverpackung ist stoßfest und eignet sich daher für den Transport per Flugzeug, Bahn, Fahrzeug oder Schiff. Halten Sie das Gerät von Regen und Schnee fern, und vermeiden Sie Stöße! Nicht auf den Kopf stellen!

Überprüfung der Stromversorgung

Überprüfen Sie die Stromversorgung. Schalten Sie das Gerät nicht an, wenn die Versorgungsspannung außerhalb des angegebenen Bereichs liegt.

Wartung

Treffen Sie Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit, Nagetieren und Verschmutzung. Die Reinigung sollte bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden. Bewahren Sie das Gerät nach dem Gebrauch an einem sicheren Ort auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Im Falle eines Fehlers, bitte eine professionelle Fachkraft mit der Reparatur beauftragen. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.

Entsorgung und Recycling

Das Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien.

Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften: Entsorgen Sie defekte Elektrogeräte bei einer entsprechenden Entsorgungsstelle. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackungen umweltgerecht und stellen Sie sie der Wertstoffsammlung zur Verfügung.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern diese Personen beaufsichtigt werden oder Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 12 Monate Garantie ab Kaufdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Der Kunde verpflichtet sich, vor Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung die Anleitung sorgfältig zu lesen, um eventuelle Bedienungsfehler auszuschließen.

Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen am Produkt ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der bestimmungsmäßigen Verwendung
- bei Mängeln, die durch unsachgemäße Wartung und/ Reparatur entstehen
- gewerbliche Nutzung des Artikels
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt inklusive Zubehör in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den vorhandenen Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original Kaufbeleg bei.

Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor. Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/Gewährleistung erstattet. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich. Diese werden nicht durch die Garantie eingeschränkt.

Hiermit erklärt SHP International Trading GmbH (Rathausstraße 5, 96342 Stockheim, Germany), dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät (iNeck air 2) ist nur zur Nutzung als Massagegerät bestimmt. Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

DE

Name des Produkts	breo iNeck air 2
Modell	neck 2b1
Nennspannung	5V 
Nennleistung	5W
Akkukapazität	2300mAh
Gewicht des Produkts	700g
Größe des Produkts	L310×W300×H100(mm)

DE 19863741

Artikelnummer: 232-578

Importeur:

SHP International Trading GmbH

Rathausstraße 5

D-96342 Stockheim

www.shp-company.com



RoHS

